



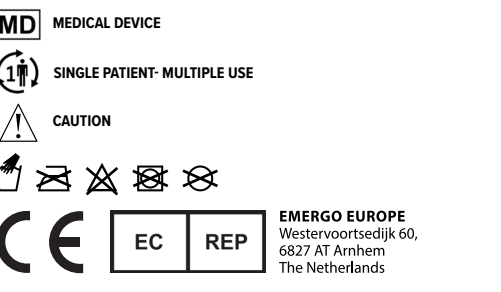

VRTX TLSO

- THORACIC LUMBAR SACRAL ORTHESIS**
LUMBAL-SAKRAL-THORAKALE ORTHOSE
ÓRTHESIS TORÁCICA LUMBOSACRA
ORTESI TORÁCICA SACRO-LOMBARE
ORTHÈSE THORACIQUE LOMBO-SACRÉE
LUMBALÉ SACRALE THORACALE ORTHÈSE
БЕДЕРНІ КРІЖОВА ХРУДНІ ОРТЕЗА
ΛΕΝΔΗΒΥΡΕΩΣΛΟΧΗ THORAXORTOSE
ΟΣΦΥΚΗ ΘΟΡΑΚΙΚΗ ΟΡΘΗΞΗ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ
LUMBAL BRYSTORTOSE
ORTEZA PIERSIOWO-ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
LANNERANRANG SAKRAALINEN RINTAKENHÄORTOSI
LUMBAL SAKRAL THORAKAL ORTOS
ОРТЕЗ ДЛЯ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
ÓRTESE TORÁCICA SACRO LOMBAR
腰骶胸部矫形器

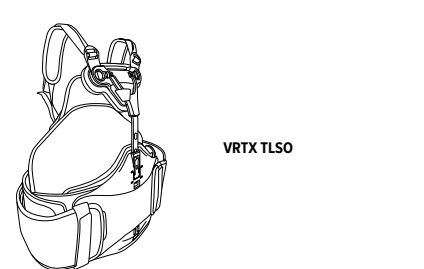

1A 	1B
2A 	2B
2C 	2D
2E 	3A
3B 	3C
3D 	3E
3F 	3G
3H 	3I
3J 	3K
3L 	3M
3N 	3O
3P 	3Q
3R 	3S
3T 	3U
3V 	3W
3X 	3Y
3Z 	3AA
3AB 	3AC
3AD 	3AE
3AF 	3AG
3AH 	3AI
3AJ 	3AK
3AL 	3AM
3AN 	3AO
3AP 	3AQ
3AR 	3AS
3AT 	3AU
3AV 	3AW
3AX 	3AY
3AZ 	3BA
3BA 	3BB
3BB 	3BC
3BC 	3BD
3BD 	3BE
3BE 	3BF
3BF 	3BF

ENGLISH	SIZE
1. PREPARING THE BRACE	2. POSITIONING THE POSTERIOR PANEL
2. POSITIONING THE POSTERIOR PANEL	3. POSITIONING ANTERIOR PANEL
4. ATTACHING ANTERIOR PANEL TO POSTERIOR PANEL	5. ADJUSTING STERNAL PAD
6. TIGHTENING THE BRACE	7. DONNING AND DOFFING
INTENDED USE	INDICATIONS
CONTRAINDICATIONS	PRECAUTIONS
CARE INSTRUCTIONS	MATERIALS
DISPOSAL	REPORTING
LIMITED WARRANTY	

DEUTSCH	GRÖSSENBESTIMMUNG
1. VORBEREITUNG DER ORTHOSE	2. ANLEGEN DES RÜCKENTEILS DER ORTHOSE
2. ANLEGEN DES RÜCKENTEILS DER ORTHOSE	3. ANLEGEN DES VORDERTEILS DER ORTHOSE
4. VERBINDEN VON VORDER- UND RÜCKENTEIL DER ORTHOSE	5. ANPASSUNG DES STERNUM-POLSTERS
6. FESTZIEHEN UND VERBUNDEN DER ORTHOSE	7. ANLEGEN UND ABLEGEN DER ORTHOSE
VERWENDUNGSSWECK	INDIKATIONEN
CONTRAINDIKATIONEN	VERSORGUNGSSACHSINNHEIMEN
PFLEGEHINWEISE	MATERIALIEN
DISPOSAL	ENTSORGUNG
MELDUNG	BESCHRÄNKTE GARANTIE
GARANTIA LIMITADA	

ITALIANO	TAGLIE
1. PREPARAZIONE DEL TUTORE	2. POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO POSTERIORE
2. POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO POSTERIORE	3. POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO ANTERIORE
4. COLLEGAMENTO DEL PANNELLO ANTERIORE AL PANNELLO POSTERIORE	5. REGOLAZIONE DEL CUSCINETTO STERNALE
6. STIRINGERE IL TUTORE	7. INDOSARE E Togliere
USO PREVISTO	INDICAZIONI
CONTRAINDICAZIONI	PRECAUZIONI
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE	MATERIALI
DISPOSIZIONE	REPORTING
LIMITATA GARANTIA	

FRANÇAIS	TAILLES
1. PRÉPARATION DE L'ORTHÈSE	2. POSITIONNEMENT DU PANNEAU POSTÉRIEUR
2. POSITIONNEMENT DU PANNEAU POSTÉRIEUR	3. POSITIONNEMENT DU PANNEAU ANTERIEUR
4. COLLEGEANT LE PANNEAU ANTERIEUR AU PANNEAU POSTERIEUR	5. RÉGLAGE DU COUSSINET STERNAL
6. SERRAGE DE L'ORTHÈSE	7. ENFILER ET RETIRER
UTILISATION PRÉVUE	INDICATIONS
CONTRA-INDICATIONS	PRÉCAUTIONS
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN	MATÉRIELS
PAS FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL	REPORTING
SIGNALIZAZIONE	

NETERLANDS	MATEN
1. DE BRACE KLAARMAKEN	2. POSITIEVENING VAN HET ACHTERPANEEL
2. POSITIEVENING VAN HET ACHTERPANEEL	3. POSITIEVENING VOORPANEEL
4. BEVESTIGEN VAN HET VOORPANEEL AAN HET ACHTERPANEEL	5. AANPASSING VAN BORSTBENENPAD
6. DE BRACE STRAK TREKKEN	7. AAN- EN UITTREKKEN
UTILISATIE VOORVERWACHT	INDICATIES
CONTRA-INDICATIES	VOORZORGSMAATREGELEN
INSTRUCTIES VOOR HET ONDERHOUD	MATERIALIEN
NIE GEMAAKT MET NATUURLIJKE RUBBER LATEX	REPORTING
BEPERKTE GARANTIE	

ČEŠTINA	NASTAVENÍ VELIKOSTI
1. PŘÍPRAVA ORTEZY	2. UMÍSTĚNÍ ZADNÍHO PANEU
2. UMÍSTĚNÍ ZADNÍHO PANEU	3. UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍHO PANEU
4. PŘÍPEVNĚNÍ PŘEDNÍHO PANEU K ZADNÍMU PANEU	5. NASTAVENÍ HRUDNÍ PODLOŽKY
6. ZATÍHNUTÍ BRACE	7. NAZÁSENI A SEJMUTÍ
ÚČEL POUŽITÍ	INDIKACE
KONTRAINDIKACE	OPREZKAUVANÍ
PÉČA A ÚDRŽBA	MATERIÁLY
NENÍ VYROBENO Z LATEXU Z PŘÍRODNÍHO KAUKUČU	REPORTING
OMEZENÁ ZÁRUKA	

ESPAÑOL	TALLAS
1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE	2. COLOCACIÓN DEL PANEL POSTERIOR
2. COLOCACIÓN DEL PANEL POSTERIOR	3. COLOCACIÓN DEL PANEL ANTERIOR
4. UNIÓN DEL PANEL ANTERIOR AL PANEL POSTERIOR	5. AJUSTE DE LA ALMOHADILLA DEL ESTERNÓN
6. FIJACIÓN DEL PANEL ANTERIOR AL PANEL POSTERIOR	7. CÓMO PONER Y QUITAR EL SOPORTE
USO PREVISTO	INDICACIONES
CONTRAINDICACIONES	PRECAUCIONES
INSTRUCCIONES DE CUIDADO	MATERIALES
DISPOSICIÓN	REPORTING
LIMITADA GARANTÍA	

ITALIANO	TAGLIE
1. PREPARAZIONE DEL TUTORE	2. POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO POSTERIORE
2. POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO POSTERIORE	3. POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO ANTERIORE
4. COLLEGAMENTO DEL PANNELLO ANTERIORE AL PANNELLO POSTERIORE	5. REGOLAZIONE DEL CUSCINETTO STERNALE
6. STIRINGERE IL TUTORE	7. INDOSARE E Togliere
USO PREVISTO	INDICAZIONI
CONTRAINDICAZIONI	PRECAUZIONI
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE	MATERIALI
DISPOSIZIONE	REPORTING
LIMITATA GARANTIA	

FRANÇAIS	TAILLES
1. PRÉPARATION DE L'ORTHÈSE	2. POSITIONNEMENT DU PANNEAU POSTÉRIEUR
2. POSITIONNEMENT DU PANNEAU POSTÉRIEUR	3. POSITIONNEMENT DU PANNEAU ANTERIEUR
4. COLLEGEANT LE PANNEAU ANTERIEUR AU PANNEAU POSTERIEUR	5. RÉGLAGE DU COUSSINET STERNAL
6. SERRAGE DE L'ORTHÈSE	7. ENFILER ET RETIRER
UTILISATION PRÉVUE	INDICATIONS
CONTRA-INDICATIONS	PRÉCAUTIONS
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN	MATÉRIELS
PAS FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL	REPORTING
SIGNALIZAZIONE	

NETERLANDS	MATEN
1. DE BRACE KLAARMAKEN	2. POSITIEVENING VAN HET ACHTERPANEEL
2. POSITIEVENING VAN HET ACHTERPANEEL	3. POSITIEVENING VOORPANEEL
4. BEVESTIGEN VAN HET VOORPANEEL AAN HET ACHTERPANEEL	5. AANPASSING VAN BORSTBENENPAD
6. DE BRACE STRAK TREKKEN	7. AAN- EN UITTREKKEN
UTILISATIE VOORVERWACHT	INDICATIES
CONTRA-INDICATIES	VOORZORGSMAATREGELEN
INSTRUCTIES VOOR HET ONDERHOUD	MATERIALIEN
NIE GEMAAKT MET NATUURLIJKE RUBBER LATEX	REPORTING
BEPERKTE GARANTIE	

ČEŠTINA	NASTAVENÍ VELIKOSTI
1. PŘÍPRAVA ORTEZY	2. UMÍSTĚNÍ ZADNÍHO PANEU
2. UMÍSTĚNÍ ZADNÍHO PANEU	3. UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍHO PANEU
4. PŘÍPEVNĚNÍ PŘEDNÍHO PANEU K ZADNÍMU PANEU	5. NASTAVENÍ HRUDNÍ PODLOŽKY
6. ZATÍHNUTÍ BRACE	7. NAZÁSENI A SEJMUTÍ
ÚČEL POUŽITÍ	INDIKACE
KONTRAINDIKACE	OPREZKAUVANÍ
PÉČA A ÚDRŽBA	MATERIÁLY
NENÍ VYROBENO Z LATEXU Z PŘÍRODNÍHO KAUKUČU	REPORTING
OMEZENÁ ZÁRUKA	

